



# Ультразвуковая зубная щётка GreenMED

SG-987

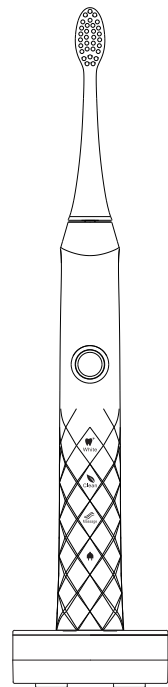


Благодарим Вас за выбор ультразвуковой щётки GreenMED. Наша компания предоставляет высококачественные продукты для эффективного ухода за полостью рта с заботой о каждом клиенте!

## Конструкция

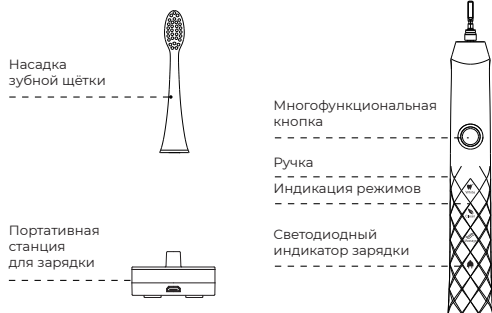

## Инструкция

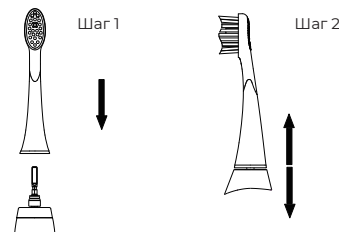

## Преимущества

1. Микровибрации щетинок (31 000 колебаний в минуту), генерируемые двойным магнитным мотором, позволяют мягко разрушать налёт, а колебательно-вращательные движения насадки (шириной до 6 мм) эффективно удаляют его.
2. Три режима работы (отбеливание, регулярная чистка, массаж) для достижения наилучшего результата в зависимости от Ваших индивидуальных потребностей.
3. Стильный дизайн в виде бриллиантовых граней и противоскользящее покрытие корпуса обеспечивают комфортную эксплуатацию.
4. Умный таймер с напоминанием (30 сек и 2 мин) позволяет проводить чистку зубов наиболее эффективным способом.
5. Класс водонепроницаемости IPX7 надёжно защищает корпус от влаги, проникновения воды, а также гарантирует безопасное использование при погружении в воду на 1 метр на 30 минут.

6. Безопасный и долговечный литиевый аккумулятор обеспечит активное использование зубной щётки в течение 21 дня, а индикатор зарядки напомнит о необходимости зарядить устройство.
7. Высококачественная инновационная щетина сменных насадок способствует естественной очистке зубов и мягкой бережной полировке их поверхности.

Название продукта: ультразвуковая зубная щётка GreenMED SG-987	
Мощность щётки: 3 Вт	Напряжение: 3,7 В
Мощность зарядки: 1,5 Вт	Напряжение: 5 В
Время зарядки: около 16 часов	Ёмкость аккумулятора: 700 мАч
Стандарт: ISO 20127:2005	Страна изготовитель: Китай

## Эксплуатация

1. Присоедините насадку к рукоятке зубной щётки, как показано на рисунке 1.
2. Смочите насадку щётки водой и добавьте зубную пасту (дозировка в два раза меньше, чем у обычной зубной пасты).
3. Аккуратно проведите щетинками щётки по зубам по направлению к линии дёсен, как показано на рисунке 2.
4. Выберите соответствующий режим, нажав кнопку выбора режима, как показано на рисунке 3.
  - а. Отбеливание — этот режим позволяет удалить поверхностные пятна и придать блеск передним зубам.
  - б. Регулярная чистка — особо щадящий режим для чувствительных зубов и дёсен. Рекомендуется для ежедневного использования.
  - в. Массаж — режим для мягкой стимуляции и массажа дёсен, улучшающий их состояние.



Рис. 1

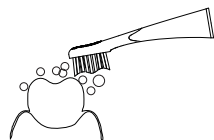


Рис. 2

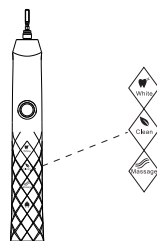


Рис. 3

5. Аккуратно и медленно проведите насадкой щётки по зубам, совершая небольшие возвратно-поступательные движения, чтобы добиться полного эффекта глубокой очистки. Следите за тем, чтобы щетинки проникали между зубами и массировали дёсны. Пожалуйста, используйте силу вибрации самой зубной щётки, не прижимайте щетинки сильно к зубам.
6. Промойте насадку и ручку щётки и убедитесь, что зубная щётка очищена.

## Очищение ультразвуковой зубной щётки

### 1. Ручка

- Снимите насадку щётки с ручки, протрите мягкой влажной тканью всю поверхность ручки и насухо высушите её.

### 2. Портативная станция для зарядки





- Протрите портативную станцию для зарядки мягкой влажной тканью и насухо высушите её.
- Не погружайте устройство в воду!

### 3. Насадка щётки

- Тщательно мойте насадку щётки и щетинки после каждого применения.
- Не вытягивайте щетинки, чтобы избежать потери формы.
- Рекомендуется менять насадку зубной щётки каждые три месяца, так как на ней скапливаются бактерии и щетина становится грубой, вследствие чего эффект чистки со временем ухудшается.

## Как заряжать устройство

1. Индуктивная зарядка. Необходимо просто поставить зубную щётку на зарядную базу, к которой подключён источник питания, и зубная щётка начнёт заряжаться.
2. Советы по зарядке. Индикатор загорается, когда устройство начинает заряжаться. После полной зарядки индикатор погаснет. Для полной зарядки потребуется не более 16 часов.
3. Многофункциональная кнопка не работает во время зарядки.
4. Если работающую щётку поставить на зарядную базу, она автоматически перестанет работать и начнёт заряжаться.

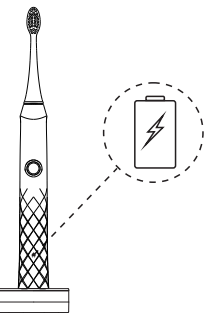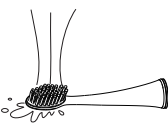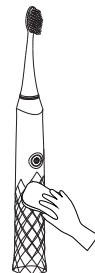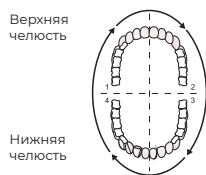

## Устранение неполадок

Ситуация	Возможная причина неполадки	Решение
Ослабела сила вибрации	Сильное воздействие на щетинки в процессе чистки	Аккуратно без давления прижимайте щетинки к зубам
Короткое время работы	1. Ручка находится в неправильном положении, что приводит к сбою процесса зарядки 2. Возможно, произошёл сбой в зарядке аккумулятора	1. Убедитесь, что при зарядке ручка установлена правильно 2. Увеличьте время зарядки
Устройство не работает	Проверьте полностью ли заряжено устройство	Пожалуйста, обратитесь в службу поддержки клиентов, чтобы решить эту проблему

## Защита окружающей среды

Пожалуйста, не выбрасывайте изделие, срок службы которого подходит к концу, вместе с обычными бытовыми отходами – сдайте его в специальное место.

## Гарантийный талон

Благодарим Вас за выбор ультразвуковой зубной щётки GreenMED. Все продукты успешно прошли строгий контроль качества. GreenMED гарантирует отсутствие дефектов в продуктах при нормальном использовании и обслуживании. Гарантия действует год. Несанкционированная разборка или ремонт аннулируют гарантию. Товар можно вернуть в течение 7 дней или совершить обмен в течение 15 дней после покупки.

Пожалуйста, заполните приведённую ниже информацию о клиенте:

Имя клиента: \_\_\_\_\_ Дата покупки: \_\_\_\_\_

Контактная информация: \_\_\_\_\_

Пожалуйста, заполните приведённую ниже информацию о магазине, где был приобретён товар:

Номер модели: \_\_\_\_\_ Дата изготовления: \_\_\_\_\_

Название торговой точки: \_\_\_\_\_